



Invacare® | **Perfecto₂ V**

Mais leve, o companheiro ideal
compatível para cada modo de
vida

Trusted Solutions,
Passionate People



O concentrador de oxigénio **PerfectO₂ V** foi concebido para um tratamento de oxigenoterapia até 5 lt/mn em posto fixo e/ou deambulatório acoplado com o sistema **Invacare Homefill II**. Mais leve e tão compacto como o seu antecessor o concentrador **PerfectO₂**, ele irá seduzir tantos os prescritores como os utilizadores!

Silencioso e leve

Novas tecnologias ligadas ao compressor interno permitiram reduzir o som por forma a conseguir um nível sonoro quase imperceptível. Dotado de peneiras inovadoras de última geração, o **PerfectO₂ V** é mais leve (18,2 kg) mantendo um excelente desempenho, incomparável em termos de pureza de oxigénio até 5 lt/mn.

Poupança de energia

Graças à tecnologia de ponta, o **PerfectO₂ V** consome pouco e otimiza os gastos de energia. Um cartão inteligente situado no interior do aparelho permite regular diferentes sistemas internos de pressão. O concentrador só tem um consumo de 320 watts.

Opções e características técnicas



Facilidade de manutenção

A substituição do filtro de admissão efetua-se através de uma porta de entrada prevista para o efeito.



Simplicidade de utilização

O humidificador, disponível como acessório, é de fácil colocação e verificação. O regulador de débito e o conjunto dos elementos do painel de controlo são bem visíveis.










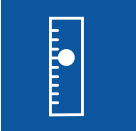




Regulador de débito pediátrico

Compatível com toda a gama de concentradores Invacare, permite o fornecimento de débitos inferiores a 0,75 l/mn. (Ref. : 1522424-IRCPF16AW)

Características Técnicas

Para informação mais detalhada sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare - www.invacare.pt.

	Profundidade total	Largura total	Altura total	Peso	Carregador AC	Consumo de energia	Nível sonoro	Pureza do oxigénio
Perfecto₂ V	 305 mm	 380 mm	 585 mm	 18.2 kg	 230 V, 50 Hz (±10%)	 320 W	 < 39 dB(A)	 87 - 96%
Perfecto₂ V	 34.5 kPa ± 10%	 0.5 - 5.0 LPM	 Up to 2500m	 ISO8359, AMDI				




Manutenção

Sem necessidade de manutenção preventiva durante 3 anos. Substituir os filtros em conformidade com o manual de utilização.

Alarmes & segurança

- Disjuntor
- **SensO₂** para controlo da pureza do oxigénio. Válvula de segurança alta pressão do compressor
- Segurança de alta temperatura
- Alarmes de alta e baixa pressão
- Função auto-diagnóstico com memorização dos códigos
- Alarmes de baixo fluxo
- Compressor High Temperature shut down

Systema SensO₂

	Concentração de oxigénio
	Superior a 85 % Sinal verde Normal
	Entre 73% e 85 % Sinal amarelo Verificar os filtros e o débito
	Abaixo de 73 % Sinal vermelho Ligue ao serviço técnico