

SB[®] 910



Uma cama hospitalar moderna



A cama *Invacare SB 910*, totalmente lavável para evitar contaminações, reúne as vantagens mais procuradas para o apoio e conforto das pessoas acamadas, e ainda características ergonómicas que permitem uma assistência facilitada por parte dos prestadores de cuidados.

A **SB 910** oferece funções inovadoras como por exemplo a função sincronizada ativada pelo "botão verde" do comando, que permite ativar em simultâneo o encosto e articulação dos joelhos reduzindo desta forma forças de pressão e efeitos de fricção.

Pensada para todas as necessidades individuais

A cama *Invacare SB 910* foi desenvolvida em estreita colaboração com as autoridades sanitárias dinamarquesas, atendendo às necessidades dos hospitais modernos. A altura variável desde o estrado até ao chão foi aumentada comparativamente a outros modelos. Tem uma regulação máxima de 83 cm e mínima de 38 cm, para garantir transferências seguras do utilizador.

Independência e elevado conforto para o utilizador

O estrado de 5 secções com inclinação de encosto e função de "botão verde" permite ao utilizador ativar as funções do estrado para conseguir uma posição de máximo conforto sem necessitar de assistência por parte dos cuidadores.

A ativação da articulação do estrado através do botão verde minimiza as forças de deslizamento e fricção. Aproveitando a função de anti-trendelenburg integrada também no botão verde, o utilizador irá ficar melhor posicionado ainda e sentirá maior conforto.

Flexibilidade e segurança

Com a **SB 910** não faltará segurança nem confiança, pois estas duas características foram estudadas com prioridade aquando do desenvolvimento. A **SB 910** é disponibilizada com guardas laterais, um comando à distância inovador que permite uma assistência ao utilizador mais personalizada e segura. Algumas funções da cama poderão ser bloqueadas para maior segurança. A cama **SB 910** é totalmente soldada, poderá ser higienizada manualmente ou na autoclave para responder da melhor forma aos procedimentos de limpeza e de descontaminação.

Características e Opções



Comando para o utilizador Comando para o cuidador

Comando com função de "botão verde" para ativar movimentos em simultâneo por forma a conseguir uma posição sentada confortável.

Permite as mesmas funções que o comando standard, permite bloquear algumas funções, ativar a função de trendelenburg e Anti-trendelenburg.



Proteções laterais. Proteções de cantos.

Características e Opções



Extensão de guardas em altura

Rebatível. Útil para aumentar a distância entre o colchão e as guardas laterais quando o colchão tem altura de 19 a 30 cm.



Extensão de estrado incorporada

Permite aumentar o comprimento do estrado em 20 cm.

A segurança da cama **SB 910** está comprovada - estabilidade e durabilidade asseguram um tempo de vida longo e isento de problemas.



Suporte de soro

Poderá ser colocado no orifício que também serve para alojamento do pendural ou fixo ao estrado da cama.



Tabuleiro rebatível

Muito prático para colocação de objetos ou documentação.



Cesto de arrumação adaptável à base do estrado da cama. Ideal para guardar bens pessoais.



Pendural

A pega pode ser ajustada em altura e em profundidade.



Cabeceiras

As cabeceiras podem ser removidas rapidamente para facilitar o trabalho dos cuidadores, principalmente em caso de paragem cardíaca.

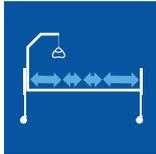
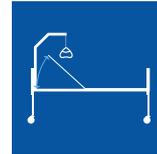
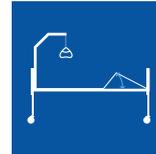


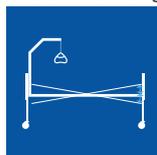
Apoio de cabeça

O encosto incorpora, de série, um apoio de cabeça que aumenta o conforto do utilizador.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

| | Medidas Interiores/ Exteriores | Medidas Interiores/Exteriores | Regulação em altura | Estrado | Altura desde a base até ao chão | Ângulo do encosto | Elevação das pernas |
|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
| SB 910 |  800/940 mm 850/990 mm |  2000/2160 mm 2050/2210 mm |  380 - 830 mm Altura total : 1590 - 2040 mm |  835 - 280 - 335 - 560 / 610 mm |  170 mm |  0 - 74° |  0 - 33° |

| | Elevação dos pés | Inclinação negativa abaixo do estrado | Trendelenburg ¹ / Anti-Trendelenburg ¹ | Peso total | Peso max utilizador |
|---------------|--|--|---|---|--|
| SB 910 |  0 - 22° |  28° |  14° / 8° |  135 kg |  SWL 300 kg 250 kg |

1. A opção de trendelenburg só pode ser ativada sob supervisão médica

NB/ A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

Em conformidade com a norma de segurança **60601-2-52**

Estrutura da cama e Cabeceiras

Branco

Azul

