


# Essential Visco

Colchão preventivo com espuma superior de viscoelástica

Superfície de contacto que redistribuiu a pressão,  
oferecendo uma maior imersão e envolvimento

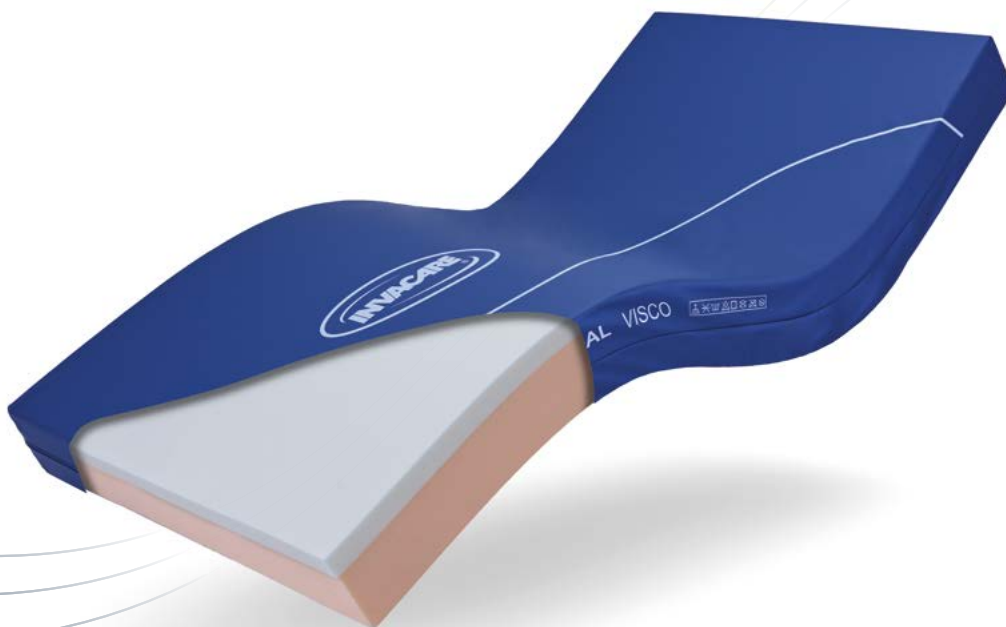

**Uma solução económica**

Para a redistribuição da pressão



**Yes, you can.®**

# Colchão acessível e de elevada qualidade



## Redistribuição da Pressão

- Com uma camada superior de espuma viscoelástica que se adapta ao corpo, proporcionando uma maior imersão e envolvimento
- A espuma de base de alta resiliência oferece um maior suporte e uma menor probabilidade de afundar demasiado e poder ficar em contacto com o estrado
- Excelentes propriedades de recuperação da forma que asseguram uma boa redistribuição da pressão.



## Redução das Forças de Fricção e Cisalhamento

- Capa de tecido de poliuretano, impermeável a líquidos, com elasticidade multi-direcional, que ajuda a reduzir as forças de fricção e de cisalhamento.
- Revestimento interior branco que permite uma inspeção para detetar danos na capa.
- Capa suave para ajudar na redução das forças de fricção.



## Qualidade Garantida

- Dupla camada de espuma, para garantir durabilidade e conforto.
- Fabricado de acordo com as normas contra incêndios BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match e BS 7177: Crib Source 5.
- Projetado para todos os ambientes, embora focado para meio domiciliário

## Dados técnicos ▼

Para obter mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, por favor, visite o nosso site: [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)



Tamanhos disponíveis ▼



Peso Max. do Utilizador ▼



Temperatura Max. de Lavagem ▼

<b>Altura de 150 mm</b>	1950 x 880 x 150 mm	140 kg	95°
<b>Altura de 120 mm</b>	1950 x 880 x 120 mm	110 kg	95°

Fabricado de acordo com: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match e BS EN 7177: Crib Source 5.

Os cuidados de enfermagem essenciais são cruciais na gestão de lesões por pressão. Este colchão pode contribuir positivamente para o resultado de um plano de prevenção de lesões por pressão que inclui educação, avaliação clínica e planeamento de ação baseado na vulnerabilidade, que são fatores fundamentais na prevenção de lesões por pressão. Uma variedade de escalas de avaliação podem ser usadas como um método formal para avaliar o risco de desenvolvimento de lesões por pressão e deve ser usada em conjunto com uma avaliação informal (avaliação de enfermagem informado) como parte de um plano abrangente e individualizado.

Tlf.: 225193360  
[marketing.pt@invacare.com](mailto:marketing.pt@invacare.com)  
[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data de impressão e publicação. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem aviso prévio. As informações apresentadas podem não estar totalmente associadas à configuração standard do produto. Essential Visco - PT - 01/2024