

rea[®]

Clematis[®]



Uma cadeira de rodas fiável e confortável

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

Na Invacare compreendemos que todas as pessoas são diferentes e que demonstram necessidades específicas no que diz respeito à personalização de uma cadeira de rodas. Também compreendemos que os utilizadores exigem adaptabilidade da sua cadeira de rodas - particularmente no assento e encosto. De forma a manter um equilíbrio perfeito e postura, sabemos que é essencial um bom grau de basculação bem como estabilidade das pernas do utilizador.

Basculação com transferência de peso

Equipada com basculação de assento, a **Rea Clematis** providencia ao utilizador diversas posições de conforto. Quando o assento bascula, as áreas de pressão alternam entre a base de assento e o encosto, ajudando a prevenir as úlceras por pressão.

Posição de sentado estável

A **Rea Clematis** vem equipada com um encosto reclinável que permite aumentar o ângulo da articulação da anca para maior conforto. Para um posicionamento melhorado, a reclinção do encosto deve ser usada em combinação com a basculação para ajudar a estabilizar a postura e permitir outros movimentos.

Compensação do comprimento do corpo

A presença dos pontos de pivot elevados em torno da pélvis e das articulações dos joelhos é significativa quando ajustar a postura. Os pontos de pivot asseguram que o corpo se move em conjunto com a unidade de assento e apoios de pernas. A **Rea Clematis** foi desenvolvida para minimizar a pressão e reduzir a compressão do corpo resultando numa postura melhorada. É crucial para o conforto do utilizador que o apoio de cabeça e os suportes de tronco permaneçam à mesma altura quer o encosto seja angulado ou não.

Características e opções:

- ▶ Manípulos de ativação das funções identificados com cores (verde, amarelo e cinza)
- ▶ Apoios de braços angulados
- ▶ Tubos do encosto ajustáveis



Outras características e benefícios



◀ Apoios de pernas reguláveis em ângulo

Com o design centrado no utilizador, os apoios de pernas reguláveis em ângulo proporcionam um suporte ergonómico e várias possibilidades de ajustes individuais. O ponto de pivot elevado dá ao comprimento da perna a compensação necessária, enquanto a almofada de suporte dos gêmeos permite que a perna descanse confortavelmente devido à correta redistribuição da pressão.



◀ Profundidade de assento ajustável

A profundidade do assento é ajustável assim como a almofada de assento é mais comprida e adapta-se a várias medidas.

O assento **Flo-Shape** tem capa em tecido Dartex e proporciona conforto quando sentado.



◀ Travão do eixo

A **Rea Clematis** vem com a opção adicional de travão do eixo para condução segura no exterior. Os cabos são fixos nas laterais da placa do encosto.



◀ Outras adaptações e acessórios

Extensão da largura do assento: Essencial para o conforto, o apoio de braços e a extensão da largura do assento permitem pequenas modificações na medida para adaptação a diversos tamanhos.

Suportes de tronco: Os suportes de tronco são desenvolvidos para dar um melhor ajuste. Também estão disponíveis na versão rebatível.

Características técnicas ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.



Largura do assento ▼ Profundidade do assento ▼ Altura do assento ▼ Altura do encosto ▼ Altura do apoio de braços ▼ Comprimento dos apoios de pernas ▼ Basculação ▼ Ângulo do encosto ▼

Rea Clematis	390, 440, 490 mm + 20 mm em incrementos	420 - 480 mm	400 - 450 mm ¹	600 - 710 mm ^{1,2}	230 - 340 mm ¹	362 - 627 mm	-1° - +19°	-1° - +32°
---------------------	--	--------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	------------	------------




Largura total ▼ Altura total ▼ Comprimento total incluindo o apoio de pernas ▼ Peso total ▼ Peso max. utilizador ▼ Peso de transporte ▼ Inclinação máxima para uso do travão de parque ▼

Rea Clematis	Larg. assento + 260 mm	960 - 1120 mm ²	1120 - 1495 mm	30 / 32 / 33,5 kg ⁴	Max 125 kg	20,5 / 21 / 21,5 kg ^{3,4}	7°
---------------------	------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------------	------------	------------------------------------	----

1. Medido a partir da placa do assento
2. Exclui o apoio de pescoço/ cabeça e os punhos
3. Sem rodas traseiras, apoio de pescoço/ cabeça, apoios de braços, apoios de pernas, suportes de tronco e almofada
4. Respetivamente para largura 390 (h 595 x L 840 X 585 mm), Largura 440 (h 595 x L 840 X 635 mm), Largura 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)



Cor do chassis ▼

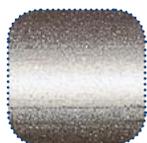

Cinza



Preto Dartex TR26

Estofa do assento ▼

Rea, design Rea e DSS (Dua Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. A Rea Azalea tem integrado o DSS que proporciona ao utilizador mais estabilidade e segurança quando bascula e reclina a cadeira.

Tel.: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.com
www.invacarearea.com

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data de impressão e publicação. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem aviso prévio. Rea Dahlia - PT - 07/2019

