

SB[®] 755



Bem-estar e Inovação



O desenho original da cama *Invacare SB 755* oferece um verdadeiro conforto ao utilizador e à pessoa que o auxilia, seja no domicílio ou em meio institucional. Graças a uma construção inovadora da secção das pernas que regula para uma posição inferior ao plano horizontal do estrado, o utilizador poderá passar rapidamente da posição deitada para uma posição sentada otimizada.

Conforto único!

A cama *Invacare SB 755* permite ao utilizador ficar, embora esteja acamado, numa posição chamada de «cadeirão»: a conceção da regulação das pernas elétrica que desce abaixo da posição horizontal do estrado, combinado com inclinação de encosto com translação incorporada, assegura que o utilizador fique numa posição confortável única, uma posição sentada na cama sem transferência e descarga das pressões.

Características e Opções avançadas

A cama *SB 755* foi projetada com um design original combinando o alumínio e a madeira. Uma gama de cabeceiras está disponível nas cores Faia ou Faia Branca. Está disponível uma opção de bateria em caso de corte de corrente.

Características e Opções



Encosto com sistema de translação para evitar efeitos de fricção.




Cabeceira **Victoria** com parte interior amovível para facilitar os cuidados ao nível dos pés ou da cabeça.



Pendural

A pega é ajustável em altura e em profundidade.

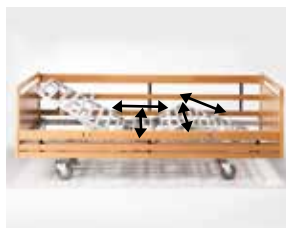

Dimensões do estrado definidos após estudos antropométricos para melhorar o conforto na posição deitada.



Extensão do estrado

100 mm do lado da cabeça + lado do pés para se adaptar da melhor forma a vários tipos de estaturas.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Medidas Interiores/Exteriores	Medidas Interiores/Exteriores	Regulação em altura	Estrado	Altura desde a base até ao chão	Ângulo do encosto	Elevação das pernas	Inclinação negativa abaixo do estrado
SB 755	900 mm / 1010 mm	2000 mm / XXXX mm ¹	350-820 mm Altura total 1600-2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	170 mm	0 - 73°	0 - 28°	0° - 16°
	Elevação dos pés	Inclinação dos pés	Peso max utilizador	Parte mais pesada				
SB 755	0° - 18°	25° / 14°	200 kg SWL : 235 kg	25 kg				

1. Variam consoante o tipo de cabeceiras

A cama não deve ser utilizada por pacientes com idade inferior a 12 anos ou com tamanho equivalente ou inferior à de uma pessoa de menos de 12 anos.

Cores do estrado e madeiras



Normas

NF EN 1970/A1 - testada pelo TUV / NF EN 14971
EN NF 60601-2-52

Garantia

2 anos contra defeitos de fábrica