

Flo-tech[®] Solution



Almofada de baixo perfil com
sistema único de bolsa de fluído



Yes, you can.

A almofada *Invacare Flo-tech Solution* é uma almofada de espuma anatómica de perfil baixo, com uma camada superior de fluído repartido em 2 bolsas individuais na zona das tuberosidades isquiáticas e do sacro. Os sacos de fluído e a espuma moldada de forma anatómica da **Flo-tech Solution** aumentam a superfície de suporte, proporcionando assim um grande nível de proteção para os utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão, ou para aqueles que já apresentam lesões nos tecidos.

Características e Opções



Capa impermeável

Capa bi-extensível impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Base antideslizante e com pega.

Disponível em 44 tamanhos

A almofada *Invacare Flo-tech Solution* está disponível em 44 tamanhos desde 380x410 até 510x460mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes)

Invacare Flo-tech opção

A opção de base de espuma "Deep" de 10 cm (100 mm) também está disponível em 12 tamanhos. (Consulte a tabela de tamanhos para obter detalhes).

Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor

Tratamento antimicrobiano adicionado a toda a espuma **Flo-tech** para ajudar a torná-la resistente ao crescimento de bactérias causadoras de odores. Ajuda a proporcionar frescura por mais tempo.

Base de espuma anatómica de baixo perfil com cobertura de fluído

A zona de contacto entre o utilizador e a almofada está protegida por uma secção de fluído que redistribui as pressões incluindo nas zonas de maior contacto. Uma camada adicional de fluído está situada debaixo da zona isquiática e do sacro para reduzir de forma mais eficaz as pressões, proporcionando um suporte ideal para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão.

Almofada anatómica de baixo perfil

Alguns utilizadores preferem uma almofada de baixo perfil porque se adapta melhor às suas atividades da vida diária. O baixo perfil facilita particularmente as transferências laterais.

Características Técnicas

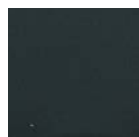
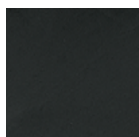
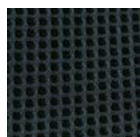
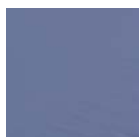
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da **Invacare Portugal**.

	Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso max. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem
	Uma gama de 44 tamanhos				
Flo-tech Solution		78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Fabricado de acordo com as normas europeias: Espuma interna: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Os limites máximos de peso do usuário são definidos assumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade apropriadas para o usuário pretendido.

Cores

Preto Suave	Tecido Preto Impermeável	Preto Tecido	Azul Báltico
			

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®