

Ajuste e adaptação perfeita



Características e Acessórios



Apoios de pernas reguláveis em largura (+25 mm para cada lado).



Apoios de braços reguláveis em largura (+25 mm para cada lado) e profundidade.



Apoio de cabeça com abas regulável em largura e profundidade.



Apoios laterais de tronco

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.




380 mm, 430 mm ¹. de 410 a 510 mm 480 mm, 530 mm ²



Regulável

Matrx preto

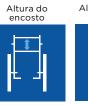

480 mm, 540 mm. 560 mm 3



270 mm a 390 mm



Estofos



(Mix preto com costuras laranja)



Dartex*

micro-air (ventilável)



em tensão bi-material micro-air

Spacer Preto



Disponível em



Invacare* **AVIVA RX20**

Invacare AVIVA Invacare Bora RX40

Invacare* Kite*

Invacare* TDX° SP2

(modelos)

Invacare[®] Storm*4



Invacare* Storm®4 X-plore



Invacare* Fox





Flexibilidade máxima para adaptação às necessidades individuais

A plataforma de assento telescópica é considerada o núcleo da unidade de assento Modulite™. O seu desenho permite inúmeras opções para posicionamento de acordo com as necessidades do utilizador. A respetiva adaptação é fácil e precisa.



maior flexibilidade

Largura de assento ajustável de 380 a 530 mm (reg. a cada 50 mm). Profundidade de assento ajustável de 410 mm a 510 mm (reg. gradual a cada



Altura de assento funcional

A conceção do assento



A estrutura lateral do assento Modulite[™] possui um sistema de calha, possibilitando: o ajuste do centro de gravidade de da cadeira; o ajuste da profundidade do encosto e

Modulite™: Escolha o t fada que mais se adap

Modulite[™] oferece diferentes tipos de encostos e almofadas, de forma a garantir máxima adaptação e conforto a cada utilizador.



Assento regulável em tensão

Composto por 9 faixas ajustáveis por faixas aderentes macho/fêmea, proporciona conforto e suporte.



Modulite™ - versátil e flexível

O assento Modulite™ está disponível na versão standard com um encosto regulável em tensão, tela em nylon bi-material e com uma plataforma de assento de largura fixa de 430 mm e regulação em profundidade de 410 mm a 510 mm. Esta regulação pode ser realizada com o utilizador sentado, evitando assim a necessidade de transferência. O encosto é regulável em ângulo e para facilitar o transporte, pode ser desmontado sem necessidade de ferramentas.







ipo de encosto e almota a si



Plataforma de assento regulável em largura e profundidade

As 3 placas que compõem este assento cobrem todas as larguras e profundidades disponíveis.



Almofadas de assento *Matrx Flo-tech*

Beneficie das excelentes propriedades de alívio de pressão e posicionamento das Almofadas *Matrx*, selecionando aquela que mais se adequa às suas necessidades.


Escolha o tipo de encosto e suporte postural

A unidade de assento Modulite[™] garante a flexibilidade necessária no que toca a opções para suporte postural. Para além das opções de encosto disponíveis, os tubos de encosto tubulares ajustáveis em largura, permitem montar todos os tipos de encostos da gama *Matrx*. A reclinação do encosto, graças ao ponto de pivot elevado, minimiza as forças de fricção, proporcionando um movimento suave e natural.



Reclinação do encosto manual

Reclinação de 30º de amplitude com possibilidade de desmontagem sem recurso a ferramentas, para facilitar o transporte.

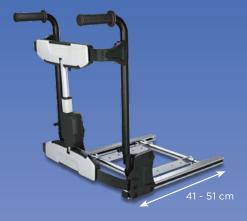

Reclinação elétrica do encosto

Movimento natural e suave com compensação graças ao ponto de pivot elevado. Possibilidade de rebater o encosto sobre o assento.

Encosto regulável em tensão com bolsa

Tela de encosto ajustável para poder adaptar-se a diferentes morfologias e fornecer o melhor suporte ao utilizador.



Encostos Invacare® Matrx® A gama de encostos Matrx permite personalizar o sistema de posicionamento, oferecendo ao utilizador um suporte e conforto ótimo.



Encosto Rea® Flex3

Ajustável em altura e largura adapta-se aos ajustes do assento telescópico. Permite adaptar o encosto independentemente da largura de assento.

