

Küschall® K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD

Na Küschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar e o poder está em si. A Küschall K-Series apresenta-se como uma solução modular, amplamente ajustável e com performance superior, tudo num só produto. Sem limites para a sua força e liberdade. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL K-SERIES

A K-Series é um ícone de design, uma criadora de tendências em chassis de monotubo. O genial sistema de assento modular vai literalmente encaixar nas suas necessidades e a configuração dinâmica irá oferecer-lhe uma experiência de condução soberba, para o manter no caminho certo.

HIDROFORMADA

O chassis hidroformado eleva o design da K-Series a um patamar superior. Esta nova tecnologia traz maior rigidez e resistência, para uma performance de condução sem concorrência, juntando linhas marcantes e uma linguagem de design sóbria a um ícone intemporal.

CHASSIS HIDROFORMADO

- Pega ergonômica, ideal para reposicionamentos e transferências, ângulo do chassis frontal disponível em 90° e 75°.

TRAVÃO ATIVO ULTRALEVE

- O novo travão de alumínio, com um design minimalista, traz a leveza para níveis sem precedentes. Precisão até nos mais pequenos detalhes.

CHASSIS TAPERED

- O chassis frontal tapered permite que a cadeira acompanhe o contorno do seu corpo, aliado a uma estética elegante.

APOIO DE PÉS

- Completamente redesenhado, com uma superfície plana, para maior conforto e para um posicionamento perfeito.



Küschall® K-SERIES

NOVA BARRA DE ENCOSTO

- Pega ergonómica, um aspeto crucial nos momentos de transporte da cadeira. Posição de instalação mais baixa, ideal para aplicação de encostos Matrix

ENCOSTO

- Encosto rebatível com 6 ajustes em ângulo para diferentes necessidades de posicionamento do tronco.

MÓDULO DE ASSENTO

- É a característica diferenciadora da K-Series. O módulo de assento oferece 5 posições diferentes de centro de gravidade, tornando a cadeira de rodas mais ou menos ativa, adaptando-se a todo o tipo de utilizadores.

SUPORTE DA FORQUETA

- Novo suporte em alumínio, soldado ao chassis frontal. Design consistente com toda a cadeira de rodas.

FORQUETA

- Novo e sóbrio design com rolamentos integrados. A acumulação de sujidade diminui significativamente e a manutenção torna-se mais fácil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ICÓNICO

Com o seu chassis de design minimalista, icónica e ultraleve a K-Series dá-lhe a oportunidade de desfrutar de todas as atividades; quer seja a caminho do trabalho ou no desempenho dos seus hobbies favoritos. A K-Series dá-lhe a liberdade para ser marcar a sua identidade e presença.




MODULAR

Um ajuste do centro de gravidade impercetível, através da regulação do módulo de assento para a frente e para trás em 5 posições distintas. Ao ajustar o assento não necessita de ajustar as forquetas. Pode ser alterado a qualquer altura, sem necessidade de componentes extra. Muito Fácil!

DINÂMICA

O chassis tem uma geometria perfeita ao longo de toda a cadeira, pelo que não é necessário ajustar nada no chassis.

As rodas permanecem sempre na mesma posição em relação ao chassis. Construção muito rígida, que origina uma grande performance de condução.

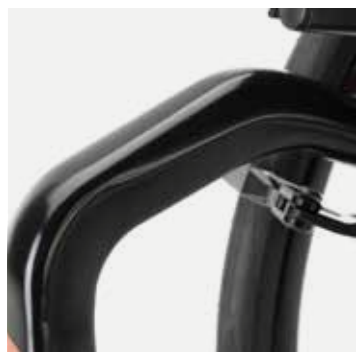

CHASSIS FRONTAL HIDROFORMADO

A tecnologia de hidroformação acrescentou ainda mais personalidade à K-Series. Um aspeto icónico que agora se torna ainda mais inconfundível graças à configuração na zona dos joelhos. Com o chassis mais retilíneo, a sua performance de condução será mais entusiasmante do que nunca.

PERSONALIZAÇÃO

1 ESCOLHA A COR DO CHASSIS



2 ESCOLHA O ESTILO



Tag



Bold

3 ESCOLHA O ACABAMENTO DO DECALQUE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DO ASSENTO (SW)

320 – 500 mm
em incrementos de 20 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO

350 – 525 mm
em incrementos de 25 mm



MEDIDA JOELHO - CALCANHAR

290 – 480 mm
em incrementos de 10 mm



ALTURA DO ENCOSTO

270 – 480 mm
em incrementos de 15 mm



ÂNGULO DO ENCOSTO

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ALTURA DO ASSENTO

Frontal: 450 – 520 mm
Traseira: 390 – 490 mm
em incrementos de 10 mm



ÂNGULO DO CHASSIS

75° / 90°
Chassis em V ou Tapered



LARGURA TOTAL

SW + 170 mm



COMPRIMENTO TOTAL

75°: aprox.: 830 - 1055 mm
90°: aprox.: 760 - 985 mm



CENTRO DE GRAVIDADE

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS

0° / 3° / 6°



PESO TOTAL

aprox.: 7.8 kg



PESO PARA TRANSPORTE

aprox.: 5.1 kg



PESO MÁX. DO UTILIZADOR

130 kg



TESTE DE COLISÃO

Aprovado - Preenche todos os requisitos da ISO 7176-19



Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
II Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e K-Series são marcas comerciais da Invacare International GmbH. Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação esteja totalmente atualizado no momento da impressão. Como parte da melhoria contínua dos seus produtos, a Invacare International GmbH reserva-se ao direito de modificar os modelos existentes a qualquer momento. © Juli 2023, Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. PT 1659368 março 2023