

# NordBed™ Kid

TESTADA E  
APROVADO  
SEGUNDO A  
NORMA EN  
50637:2017  
DA TÜV



Segurança e conforto para a criança,  
em todos os momentos

SEGURA | AJUSTÁVEL | CONFORTÁVEL

**INVACARE**  
Yes, you can.®

# NordBed Kid

## A cama pediátrica Invacare, segura e moderna

A NordBed Kid é ideal para ambientes domiciliários ou institucionais.

### **Concebida para servir a criança e o cuidador**

A NordBed Kid é adequada a crianças dos 7 aos 10 anos ou dos 125 aos 154 cm de altura. Está disponível com 2 tipos de guardas laterais.

As opções de guardas laterais incluem guardas deslizantes ou em leque, ambas com 40cm de altura. Existe ainda a possibilidade de escolher a opção em leque com 80cm - para que possa escolher a guarda lateral mais adequada à criança.

O estrado, com encosto, apoio de pernas e dobra dos joelhos ajustáveis, foi concebido com base nas medidas antropométricas e oferece apoio anatómico e conforto excecional.

Estão disponíveis proteções laterais - que ficam presas à parte interior das guardas laterais, com fixações. Oferecem maior proteção à criança enquanto permanece posicionada no leito, durante o manuseamento das guardas, por exemplo.

### **Segurança**

Ao desenhar a cama, a segurança foi o destaque, desde o mecanismo de bloqueio das guardas laterais, até ao suporte que mantém o comando fora do alcance da criança. Além disso, a NordBed Kid está em conformidade com a nova Norma Europeia de Segurança EN 50637:2017, para camas médicas pediátricas, ao mesmo tempo que mantém um design moderno e acolhedor.

### **Ambiente de trabalho seguro para o cuidador**

A cama NordBed Kid é ajustável em altura, desde a posição mais baixa a 30cm, para permitir transferências autónomas, até 80cm, que é a altura adequada para o cuidador. O rebaixamento das guardas com ativação central e o estrado totalmente elétrico foram concebidos para garantir um ambiente de trabalho seguro e confortável para o cuidador.



# Principais características da NordBed Kid

## 1. Bloqueio da guarda lateral

- ▶ Guardas em leque com um fecho no topo, que é fácil de operar pelo cuidador
- ▶ Para garantir que não há risco de lesão para a criança quando está na cama.

## 2. Comando discreto e intuitivo com bloqueios de segurança

- ▶ Botões coloridos para facilitar o reconhecimento das funções
- ▶ O mecanismo de bloqueio de segurança por ímã garante o uso correto e seguro, apenas do cuidador



## 3. Armazenamento seguro do comando

- ▶ O comando pode ser facilmente, e de forma segura, guardado no suporte na base da cama, ficando apenas acessível ao cuidador.



## 4. Altura ajustável eletricamente

- ▶ Desde 30cm, para transferências autónomas dos utilizadores fisicamente aptos, até 80cm a pensar no cuidador.





## Norma de segurança EN50637:2017

O design está em conformidade com novos padrões europeus de segurança das camas



## Design

Moderno, acolhedor num tom de faia.



### 5. Escolha das guardas laterais

- ▶ As opções de guardas laterais permitem-lhe configurar a cama de acordo com as necessidades da criança.
- ▶ As opções incluem guardas deslizantes ou em leque.
- ▶ Além disso, opções de altura de 40cm e 80cm na opção em leque.

### 6. Estrado ergonómico

- ▶ Comprimento do estrado desenhado de acordo com as medidas antropométricas, para maior apoio e excecional conforto da criança

### 7. Estrado articulado

- ▶ O estrado é articulado e combina funções elétricas, do encosto e dobra dos joelhos, com uma função manual de elevação dos pés, com cremalheira - para oferecer ótimo apoio à criança.

# Desenhada para conforto e segurança

A NordBed Kid oferece máximo conforto, estando simultaneamente de acordo com os rigorosos padrões europeus de segurança.

## Opções de guardas laterais

A NordBed kid está disponível com duas opções de guardas laterais, para que configure a cama à medida das necessidades da criança. As guardas foram desenvolvidas com maior rigidez e resistência, para estarem de acordo com os requisitos da norma EN50637:2017. As opções estão disponíveis abaixo.

### Em Leque

- ▶ as guardas podem ser parcial ou totalmente abertas para facilitar o acesso, enquanto mantêm a estabilidade da cama e a segurança da criança
- ▶ Fecho no topo fácil de usar, enquanto mantém a resistência da guarda
- ▶ O fecho foi desenhado para evitar que a criança fique presa ou lesionada quando está na cama.
- ▶ Disponível com 40cm de altura e 80cm, em função da cabeceira escolhida.

### Deslizantes

- ▶ Painel único onde a guarda desliza num só movimento para um acesso fácil.
- ▶ Ativador central e fácil de usar, eprmite que o cuidador permaneça em frente à criança.
- ▶ Apenas disponível com opção de 40 cm de altura

### Proteções

- ▶ Espuma de Proteção disponível para todas as opções de cabeceiras e guardas laterais, oferecendo conforto e proteção adicionais à criança assim como tranquilidade ao cuidador.
- ▶ Todas as guardas laterais podem ser totalmente manuseadas com a espuma de proteção colocada.



## Invacare **Dacapo Kid**

Colchão especialmente desenvolvido para a NordBed Kid, disponível em dois tamanhos, dependendo se é utilizado com proteções laterais ou não (1558x790x100mm ou 1558x770x100mm). Apresenta uma superfície de espuma recortada de alta resiliência, que reduz as forças de cisalhamento e redistribui a pressão assim como melhora a ventilação.



### Capa **Dacapo Kid**

- ▶ Impermeável
- ▶ Capa de poliuretano respirável
- ▶ Multielástica
- ▶ Lavável a 95°C
- ▶ Fecho coberto

## Características técnicas ▼

Para mais informação de pré-venda sobre a NordBed Kid, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.



Largura exterior/  
Largura interior ▼



Comprimento interior/  
Comprimento exterior ▼



Altura estrado ▼



Estrado ▼



Altura da base ▼



Ângulo do encosto ▼

**NordBed Kid**

90/80cm

160/166cm

30-80cm

67-13-18-55cm

15cm

0-70°



Ângulo dobra dos joelhos ▼



Elevação dos pés ▼



Peso máx. utilizador ▼



Peso total (sem cabeceiras) ▼



Parte mais pesada ▼

**NordBed Kid**

0-12°


0-30°

70kg

95kg

55kg

## Estrutura e tom de madeira ▼

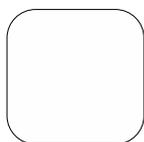

**Branco**  
RAL: 9016



**Faia**



Testada pela TÜV em conformidade com a norma EN50637:2017

Nota: as cores podem variar ligeiramente daquelas aqui apresentadas

## Regulamentações ▼

**Tel.: 225 193 360**  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



**Yes, you can.®**