

Descubra.

Um novo design

Explore.

Novas possibilidades

Experimente.

Desempenho ainda melhor

Apresentamos a nova Esprit

Action®. Um novo design moderno, combinado com tecnologia inovadora, desempenho superior e detalhes cuidadosamente considerados.



ESPRIT Action Junior

A Esprit Action® Junior permite às crianças desfrutar de um estilo de vida ativo e independente. A nova versão Junior inspira as crianças a serem felizes, a serem ativas e a mostrarem confiança e distribuírem sorrisos.

Quer seja a conviver com amigos dentro e fora de casa ou a brincar ao ar livre, cada criança pode participar ativamente e sentir-se bem na sua Esprit Action®. Com uma estética mais apurada graças à escolha de três combinações de cores, a Esprit Action® garante às crianças a utilização da sua cadeira de rodas sem limitações. Com mais possibilidades e mais diversão.

Dados Técnicos

Para mais informações acerca deste produto, incluindo o manual do utilizador, por favor visite o nosso website: www.invacare.pt

	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Comprimento dos apoios para os pés	Ângulo de assento	Ângulo de encosto
Esprit Action®	380 - 605 mm	400 - 500 mm	460 ou 485 mm	390 - 510 mm	340 - 470 mm	3°	0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 ou 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°	0° - 30°
	Largura total	Altura Total	Comprimento total incl. apoio de pés	Comprimento total sem apoio de pés	Peso total	Peso máximo do utilizador	Capacidade da bateria
Esprit Action®	Largura de Assento + 180 mm	945 - 1000 mm	980 - 1115 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	125 kg	36 V (3 x 12V)/ 7,65 Ah
Esprit Action® Junior	Largura de Assento + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	80 kg	36 V (3 x 12V)/ 7,65 Ah
	Diametro de viragem	Superação Obstáculos	Inclinação máxima	Capacidade do motor	Autonomia	Velocidade	Apoios de braços ajustáveis
Esprit Action®	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h ou 8 km/h	+50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h ou 8 km/h	+50 mm

¹O peso da peça mais pesada é o chassis com 15kg

Cores do Chassis

Adulto	Adulto e Junior	Junior
Cinza escuro	Azul pop	Azul Oceano
Preto Mate	Roxo	

Detalhes de Cor (Forqueta)

Verde Lima	Preto

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

© 2021 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data da publicação/ impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem consulta prévia. PT - 09/21



Yes, you can.®

ESPRIT Action®

DESCUBRA. EXPLORE. EXPERIMENTE.



NOVA cadeira de rodas eléctrica encartável e leve.

Equipada com inovadora tecnologia giroscópio



Yes, you can.®


PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

Design moderno e apelativo

A nossa nova Esprit Action® apresenta evolução com a máxima precisão e técnica. Cada parte do novo design é sinal de progresso.

Uma extensa programação centrada nas necessidades e opinião dos clientes fez a diferença. A Esprit Action® é leve, encartável e utiliza rodas motorizadas com tecnologia inovadora Alber, tudo isto sobre um chassis de alumínio

altamente configurável tendo por base a nossa popular gama Action®. O resultado final é positivo e a evolução é evidente. Está finalmente na hora de desfrutar da liberdade e do verdadeiro espírito da Esprit Action®.

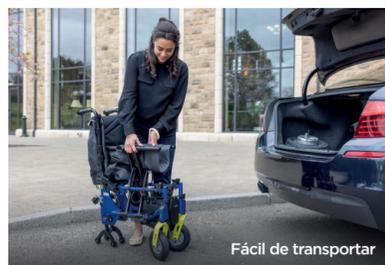

Fácil de transportar



Supera inclinações até 6°



Encartável com vários componentes fáceis de remover



Altamente manobrável em espaços mais estreitos

Com uma nova tecnologia inovadora (giroscópio integrado no comando) em conjunto com a base muito compacta proporciona uma maior manobrabilidade tornando-se muito fácil de utilizar mesmo em espaços mais reduzidos. As rodas traseiras com posicionamento mais avançado para melhor tração e um raio de viragem mais pequeno.



Supera inclinações sem esforço

Supera Inclinações até 6° sem esforço, com máxima suavidade e estabilidade. A nova tecnologia de giroscópio reduz a aceleração de acordo com o grau da inclinação e deteta rapidamente quando a cadeira de rodas está em inclinação.

Mais fácil de transportar

Graças à combinação de um chassis leve e dobrável da família Action®, rodas traseiras e bateria removíveis, a Esprit Action® pode ser encartada para transporte sem precisar de rampas nem veículos adaptados.



Compatibilidade cruzada

A compatibilidade cruzada com a gama Action® permite adaptações rápidas. A Esprit Action® pode ser configurada, de forma rápida e rentável e tendo em consideração as necessidades específicas de vários tipos de utilizadores.

15kg*

*mínimo de peso transportável

8km/h
opção de velocidade

14" Rodas com sistema motorizado Alber



Melhor desempenho na condução

As rodas traseiras de 14" e os pneus traseiros e dianteiros pneumáticos proporcionam uma condução suave e confortável. O novo modelo também apresenta uma nova opção de velocidade de 8km/h para melhor desempenho no exterior.



Opções



Sistema rebatível para o comando, muito leve



A opção de rodas anti-voiteio com a função de elevação para facilitar a extração das rodas



Conforto & Suporte

O posicionamento perfeito é alcançado através de opções e acessórios altamente configuráveis. A cadeira de rodas pode ser ajustada para satisfazer as necessidades clínicas dos vários utilizadores.