

rea[®]

Azalea[®] / Azalea[®] Assist



Oferece um excelente
conforto de assento e muitas
possibilidades de ajustamento!



Yes, you can.

A **Rea Azalea** é a escolha natural para o cliente moderadamente activo, bem como para o mais passivo. O sistema de assentos confortáveis permite ao cliente alterar a posição do assento, garantindo o máximo conforto em todos os momentos, o que, combinado com excelentes características de condução, faz da **Rea Azalea** a escolha ideal. A **Azalea** é uma cadeira de rodas de autopropulsão com rodas traseiras grandes e complementada com uma versão de trânsito. A versão de trânsito assume a designação **Azalea Assiste** e partilha o mesmo chassis da **Azalea**, mas com rodas traseiras pequenas. O novo encosto, Flex 3, é multi-ajustável em altura, largura e adapta-se a diferentes tipos de anatomia corporal. Disponível em 5 cores de chassis e com 3 materiais de estofos diferentes.

Basculação & reclinção tornam a vida confortável

A **Rea Azalea** e a **Rea Azalea Assist** têm uma basculação de 25° de assento e um encosto de 30° de inclinação, respetivamente. Tanto a basculação como a reclinção podem ser facilmente ajustadas manualmente ou eletricamente pelo assistente e também pelo cliente com a opção das funções ativadas eletricamente através dum comando. O encosto apresenta mecanismo de regulação biomecânico do posicionamento, que respeita o movimento natural do tronco do utilizador ao ajustar o ângulo do encosto.

Combinado com a função de basculação do assento, o DSS (Dual Stability System) ajuda a prevenir o aparecimento de úlceras por pressão graças ao posicionamento do corpo sem fricção.



Principais características e benefícios




◀ Flex 3, encosto rígido

- A placa rígida de encosto é uma placa forte e robusta que oferece estabilidade ao cliente numa posição vertical ou numa inclinação de 25° e 30°. Ao reclinar-se o utilizador vai sentir-se seguro.
- Três posições para um equilíbrio da roda traseira.
- Esta placa de encosto oferece ajuste em altura para os clientes mais altos e ajuste de largura para clientes mais largos.



◀ Flex 3, encosto regulável em tensão

- O encosto multiajustável pode ser ajustado em altura e em largura para diferentes formas de corpo.
- Pode até ajustá-lo para que seja mais largo no topo e mais estreito no fundo ou vice-versa, para os clientes que têm ombros mais largos ou ancas.
- Este encosto oferece mais conforto com as tiras macias que acompanham o movimento natural das costas do cliente.

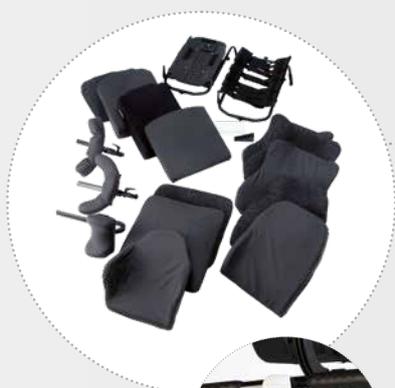

◀ Outras adaptações e acessórios

- O cliente ou cuidador pode facilmente mudar a posição de assento com o poder de basculação e reclinación através de controlo remoto (versão elétrica)
- O mesmo chassis para todas rodas traseiras de 16, 20, 22 e 24". Ao utilizar o mesmo chassis, reduz o número de peças necessárias e acomoda diferentes necessidades.
- Com assento regulável em largura e profundidade, a cadeira pode ser facilmente ajustada tanto na largura como na profundidade e adaptada às várias especificações das pessoas. O encosto é também ajustável em altura.
- Ajustes individuais de largura nos apoios dos braços, apoios para pernas e acessórios para as necessidades individuais dos clientes.




Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Altura do assento ▼	Altura do encosto ▼	Altura do apoio de braços ▼	Comprimento dos apoios de pernas ▼	
Rea Azalea & Azalea Assist	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/ 440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Placa rígida do encosto: 560 - 790 mm Encosto regulável em tensão: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm
Basculação ▼	Ângulo do encosto ▼	Largura total ▼	Altura total ▼	Comprimento total incluindo o apoio de pernas ▼	Peso total ▼	
Rea Azalea & Azalea Assist	-1° to 23° (+1° to 25°)	0°-30°	(Larg. assento + 220 mm) (Larg. assento + 230 mm)	900-1250 mm	950 - 1035 mm	34 kg (Larg. assento 440 mm)
Peso max. utilizador ▼	Peso de transporte ▼	Crash tested ▼	Inclinação máxima para uso de travão de parque ▼			
Rea Azalea & Azalea Assist	Max 135 kg	16,5 kg ¹	ISO 7176-19	7°		

1. Peso de transporte aumenta 4.2 kg se escolher a opção de basculação elétrica e reclinção

Cor do chassis ▼

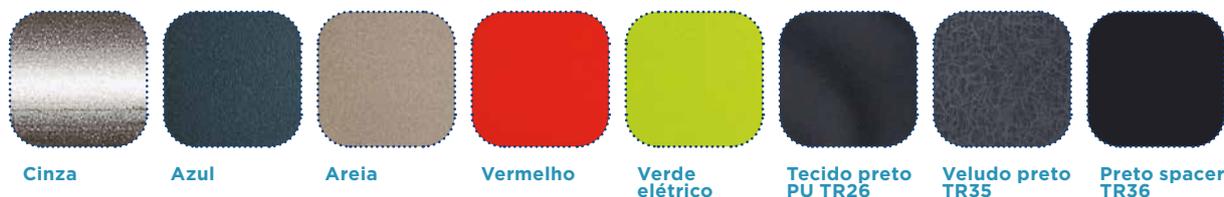

Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) design são marcas registadas da Invacare International. A Rea Azalea foi concebida com DSS (Dual Stability System). Proporciona ao utilizador uma maior estabilidade e segurança ao ser inclinado ou o encosto reclinado.

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, n°949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. Todos os direitos reservados. Toda a informação citada é credível ser correta no momento da impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto, sem consulta prévia.
Rea Azalea & Azalea Assist - PT- 06/2022



Yes, you can.®