

Accent[®]

Para um cuidado diário



Cama articulada para uso médico

Escolha de confiança dos profissionais de saúde



Qualidade a um preço acessível

A cama Accent oferece uma solução simples e acessível, com qualidade tanto para os cuidados domiciliários como para os cuidados de longa duração.



Segurança

Todas as camas Invacare cumprem as normas de segurança IEC 60601-2-52.



Orientada para os cuidados

Cada cama Invacare foi concebida, tendo em conta o conhecimento dos ambientes de cuidados médicos.



Qualidade

Os nossos designs e especificações de camas satisfazem os mais elevados padrões de exigência.



Conforto

A cama Accent promove o descanso, o bem-estar e a independência.




Preparada para cuidados médicos domiciliários

A cama Accent é uma opção fácil e intuitiva para pacientes, familiares e cuidadores.



O colchão Invacare é vendido em separado.

Cuidadosamente concebida

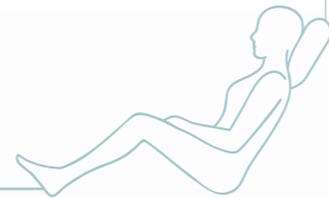

Com uma montagem simples, ajustes suaves e detalhes bem pensados, a Accent oferece cuidados de qualidade diariamente.

01



Opção económica
Uma cama simples e de qualidade a um preço acessível.

11°

09

Tilt
Para posicionamento e melhor gestão da pressão.

02



Montagem rápida e fácil
Montagem e desmontagem simples, sem necessidade de utilizar ferramentas. Fácil de manusear.

03



Posições ajustáveis
As secções do encosto e das coxas ajustam-se eletricamente através do comando.

04



Altura ajustável
Ajuste entre 400 e 800 mm para alturas de trabalho confortáveis e uma excelente prestação de cuidados ao paciente.

05



Comando intuitivo
Com botões claros para facilitar a utilização.

06



Guardas laterais em madeira maciça
Fabricadas em madeira de pinho para uma excelente robustez e resistência

08



Fácil de Higienizar
Adequada para limpeza com detergentes suaves, o que a torna ideal para ambientes de uso único ou múltiplo. Consulte o manual do utilizador.

07





Caixa de controlo e cablagem compactos
A caixa mais pequena, com cabos mais organizados e destacáveis, proporciona mais espaço debaixo da cama e facilita a sua movimentação.



Opções Accent®

Simplificar os cuidados com uma variedade de opções para o dia-a-dia.

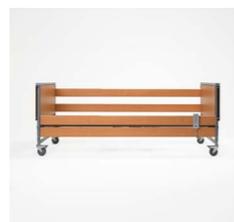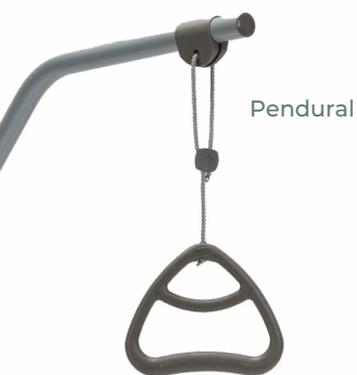

Slim
Guarda lateral standard em madeira de pinho.



Scala 2
Guarda lateral em aço. (disponibilidade sob consulta)



Verso HC
Guarda lateral rebatível em aço. (disponibilidade sob consulta)



Aria
Guarda lateral completa em aço. (disponibilidade sob consulta)



Painéis de madeira
Painéis de madeira opcionais para as cabeceiras



Fácil de transportar

O conjunto de peças de encaixe para transporte, está disponível como acessório e torna ainda mais fácil mover e guardar a cama.



Veja o vídeo explicativo sobre montagem e desmontagem.



Especificações técnicas



Largura interior
90 cm



Largura exterior
102 cm



Ajuste em altura
40 - 80 cm



Comprimento interior
208 cm



Comprimento exterior
224 cm



Ângulo de inclinação/tilt
11°



Peso máximo do utilizador
145 kg



Peso
64 kg



Parte mais pesada
16 kg



Estrado
80 - 23 - 30
- 67 cm



Ângulo do encosto
0 - 70°



Ângulo da coxa
0 - 33°

Cor



Aço



Faia



Cumpe a norma de segurança IEC 60601-2-52



Certificação ISO 9001 e ISO 13485

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, n°949
4465-784 Leça do Balio
Portugal