



AVIVA RX10

POWER SERIES



Acesso a todas as áreas

Cadeira de rodas elétrica ultracompacta com tração traseira



| AVIVA RX10

Controlo, confiança e independência, todos os dias.

Apresentamos a cadeira de rodas elétrica ultracompacta AVIVA RX10 com tração traseira, pensada para permitir uma condução fácil em qualquer ambiente.

Estreita, intuitiva e segura de conduzir, foi concebida para proporcionar conforto e um desempenho fiável.



| AVIVA RX10

Design. Tecnologia. Performance.

O novo e entusiasmante membro da gama **AVIVA RX**. A base compacta da RX10 proporciona um desempenho estável e controlado, ajudando-o a conduzir com confiança e conforto todos os dias.



539 mm*

Largura da base de tração



Design ultracompacto

Com a distância entre eixos mais curta e estreita da série, a **AVIVA RX10** circula com facilidade em espaços interiores. Seja a deslocar-se de divisão em divisão, a contornar esquinas ou a fazer rotações de 360°, o design ultracompacto facilita a manobrabilidade mesmo nos espaços mais apertados.



Conforto e controlo

Rodas traseiras de **14"** e dianteiras de **9"**; e um módulo de potência de 75A, garantem uma condução confortável e controlada em todos os momentos. Desde superfícies interiores a terrenos exteriores, a **RX10** oferece uma solução de mobilidade simples e sem compromissos.



Design minimalista

Com a simplicidade no centro, o design minimalista da **AVIVA RX10** foi especificamente concebido para proporcionar uma mobilidade discreta e fiável onde quer que vá.





| AVIVA RX10

Fácil configuração com componentes da família *Action*®

A **AVIVA RX10** foi concebida em combinação com opções de assento Action, líder de mercado. Isto torna o posicionamento e os ajustes individuais rápidos e fáceis, para um conforto ideal.



0-20°

de basculação do assento

Disponível em versão com basculação elétrica

0-30°

Reclinação manual do encosto

Disponível em versão com reclinação elétrica



Opções de largura de assento

430 ou 480 mm, sendo que cada tamanho é ajustável em +25 mm de cada lado nos apoios de braços e nos apoios de pés.




Encosto ajustável em tensão

que se adapta à anatomia do corpo para conforto e suporte ideais.



Almofada de assento em espuma de 60 mm

para maior conforto.

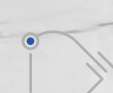

Apoio de pernas a 80° rebatíveis para facilitar a transferência

Comprimento ajustável entre 245 e 370 mm.



Apoio de braços ajustável em altura e profundidade

240 - 315 mm de altura, até 90 mm de profundidade.



Profundidade do assento ajustável

410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

Controlo preciso com a tecnologia **LiNX**

Concebida para ser fácil de utilizar e proporcionar um controlo preciso, a **AVIVA RX10** inclui a tecnologia LiNX para facilitar a condução no dia-a-dia.



Indicador LED de carga da bateria

oferece tranquilidade quanto ao nível de carga, onde quer que vá.



Seletor de velocidade

para um controlo independente e personalizado.



Suporte rebatível do comando

que facilita o posicionamento do joystick e o acesso a secretárias.

Dependendo da configuração, a RX10 está disponível com os comandos LiNX REM060 ou REM210.



AVIVA RX10

Características técnicas.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso site www.invacare.pt.

Cor



Preta

804 - 809 mm*

Raio de viragem
*depende da configuração



Largura de assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Altura do apoio de braço	Comprimento do apoio de pés	Ângulo do assento
430 - 480 mm	410 - 510 mm	451 - 471 mm	510 mm	240 - 315 mm	245 - 370 mm	0° - 20° (manual) 0° - 20° (elétrico)
Ajuste de 25 mm de cada lado nos apoios de braços e nos apoios de pernas.		Em incrementos de 25 mm.				
Ângulo do encosto	Altura total	Comprimento total, com apoios de pés	Comprimento total, sem apoios de pés	Largura total	Peso máx. do utilizador	Capacidade da bateria
90° - 120°	1350 mm	1035 mm	824 mm	539 mm	136 kg	51Ah (Gel)
Altura máx. de obstáculos transponíveis	Máxima Inclinação	Velocidade	Autonomia	Peso total	Rodas motrizes	Rodas dianteiras
50 mm	6° (10.5%)	6 ou 10 km/h	25.6 km (10 km/ h)	113.6 kg	14"	9"

AVIVA RX
AVIVA FX
TDX SP2
Esprit Action
Kompas
Storm 4

P O W E R S E R I E S

Tel: +351 225 193 360

marketing.pt@invacare.com

www.invacare.pt

©2026 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados.
Todas as informações citadas são consideradas corretas à data de
impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificações
do produto sem aviso prévio. AVIVA RX10_PT-23072026

