


Propad Revolve Si

NOVIDADE



A combinação perfeita de espuma e gel silicone

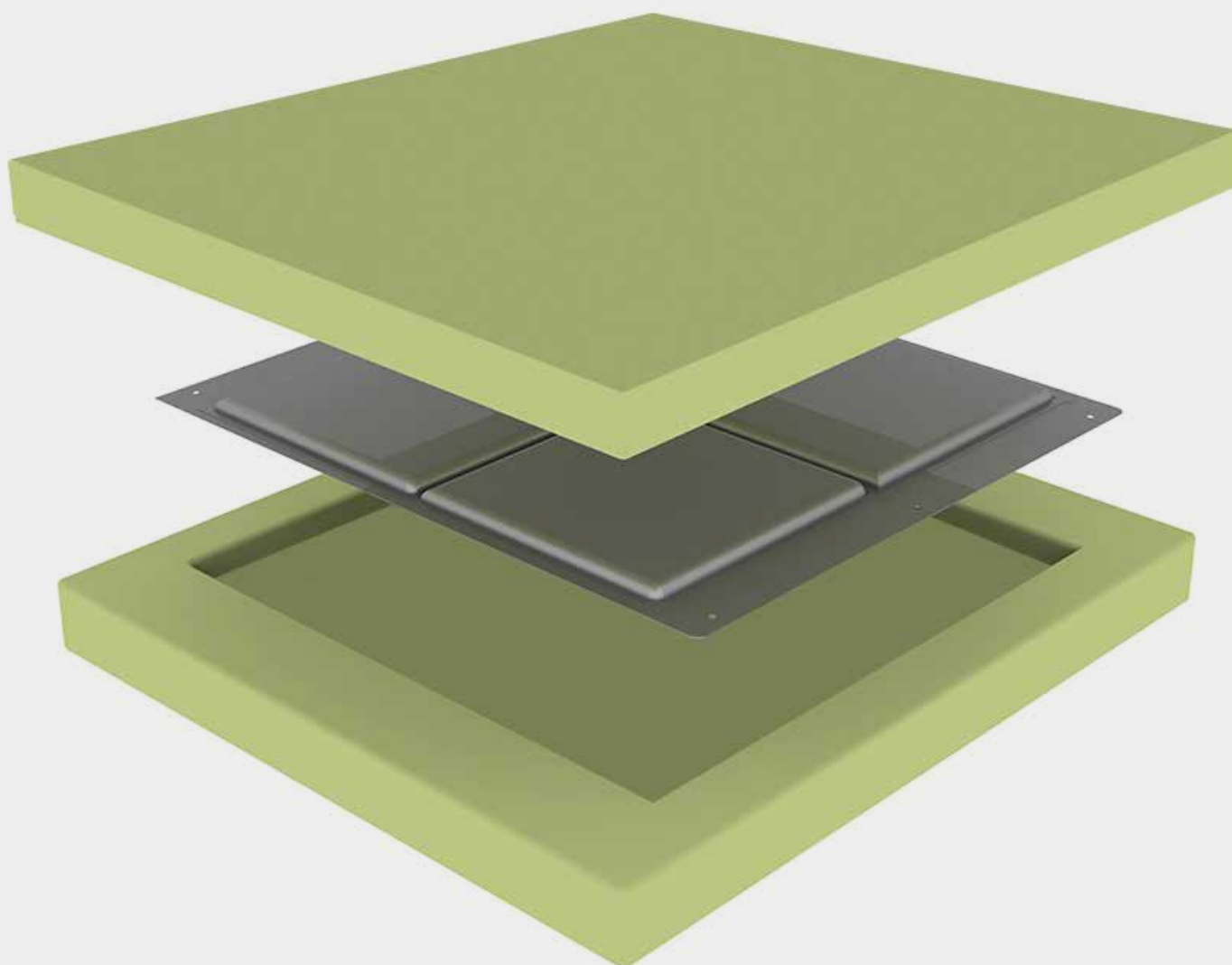


O conhecimento da Invacare na inovação e fabrico de almofadas foi usado para desenvolver a **Propad Revolve Si**. Para isso, foram consideradas as opiniões de vários profissionais de saúde no que toca aos desafios que enfrentam com as almofadas para posicionamento sentado.

Como resultado, a **Propad Revolve Si** foi desenvolvida para:

- Oferecer um uso seguro e fácil da almofada
- Combinar materiais de qualidade e excelência
- Ir ao encontro de utilizadores em alto risco de desenvolver úlceras por pressão

A **Propad Revolve Si** combina duas camadas de alta qualidade moldadas em espuma de alta resiliência, com uma bolsa de fluido de silicone incorporado, não sensível à temperatura, para uma proteção superior da pele do utilizador.

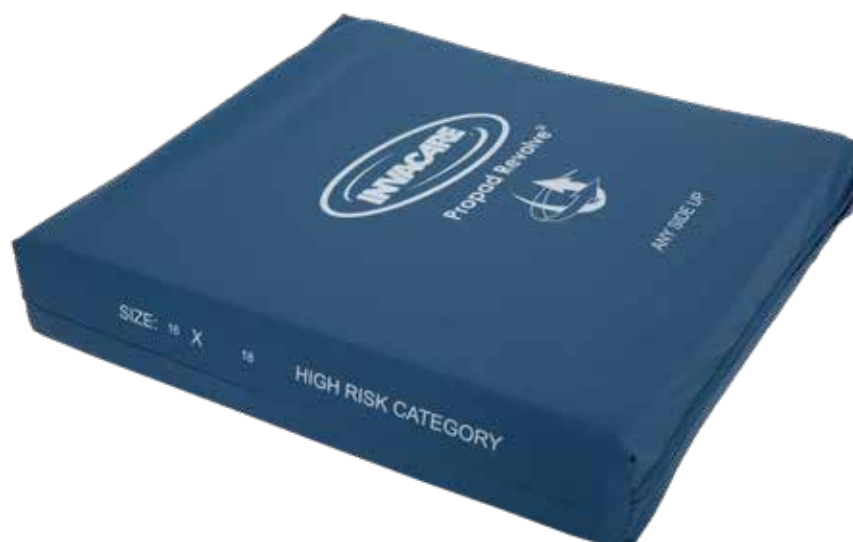

Omnidirecional - pode ser colocada em qualquer um dos lados!

Depois de observar muitos utilizadores sentados em almofadas com contorno e numa posição incorreta, desenvolvemos a **Propad Revolve Si** com o conceito de que pode estar colocada de qualquer forma e em qualquer direção sem comprometer o conforto do utilizador. Este design versátil permite um uso flexível na parte superior, inferior, frente e verso, reduzindo a necessidade de avaliações e preparação dos assentos.




Perceber o poder dos materiais

Espuma de alta resiliência e qualidade

Transversal a toda a gama de almofadas Invacare, a **Propad Revolve Si** utiliza a mesma qualidade de espuma de alta resiliência que a restante gama **Matrx Flotech**, ao usar uma estrutura premium de células abertas e poliuretano flexível.

A performance da almofada é reforçada por:

- Químicos retardadores de chama reduzem a inflamabilidade da almofada
- Agente de ventilação cria uma característica de estrutura celular e determina a densidade da espuma
- O surfactante usado para modificar as características da espuma ajuda a regular o tamanho da célula e estabiliza a estrutura celular da espuma
- O tratamento **Ultra-Fresh** proporciona a sensação de frescura e longevidade graças à proteção anti-microbiana e anti-odor.
- A **Propad Revolve Si** usa uma espuma de alta densidade (70kg/m³) e proporciona suporte duradouro sem perder qualidade ou deixar que o utilizador deslize quando está sentado.

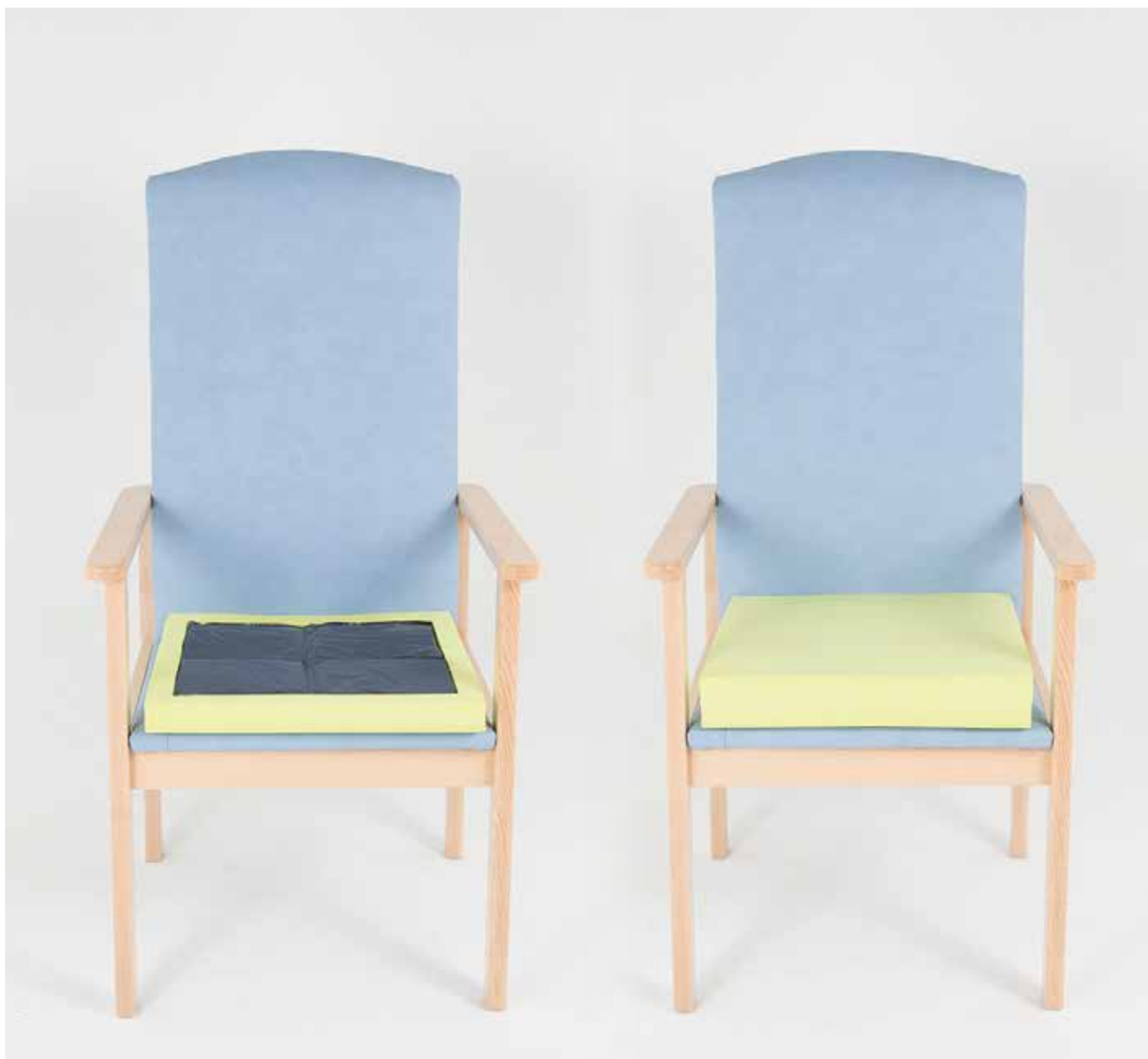



Benefícios da tecnologia do fluido Flo-tech

A **Propad Revolve Si** tem uma bolsa de fluido (silicone) integrado na base da espuma da reconhecida tecnologia **Flo-tech** Invacare. Este conceito de uma camada de fluido interna foi desenvolvido tendo em consideração os utilizadores mais propensos a mudanças de temperatura e que sentem desconforto (demasiada frescura) em almofadas com fluido na camada superior. Com a Propad Revolve podem encontrar a solução ideal pois beneficiam da proteção da pele garantida pelo fluido, mas sem contacto já que o mesmo está colocado entre duas camadas de espuma macia. Por esse motivo, beneficiam das propriedades de redistribuição da pressão de dois materiais garantindo conforto e boa regulação da temperatura.

As vantagens adicionais do fluido **Flo-tech** incluem:

- Excelentes propriedades de dispersão para promover maior imersão e envolvimento
- Fluido não sensível à temperatura vai garantir que a viscosidade mantém-se consistente em todos os climas

O saco de fluido (silicone) da **Propad Revolve Si** está dividido em quatro compartimentos para assegurar que o fluido permanece situado debaixo das Tuberosidades Isquiáticas (independentemente da orientação). Isto oferece maior proteção a uma das áreas anatómicas mais críticas para o desenvolvimento de úlceras por pressão.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Dimensões*	Altura	Peso total do produto	Peso máx. utilizador	Temperatura máx. lavagem
Propad Revolve Si	410 x 410 mm 430 x 430 mm 460 x 410 mm	75mm	2.5kg	125 kg	90°